


— L'expertise en **soft laser**

premio 30

Laser duo

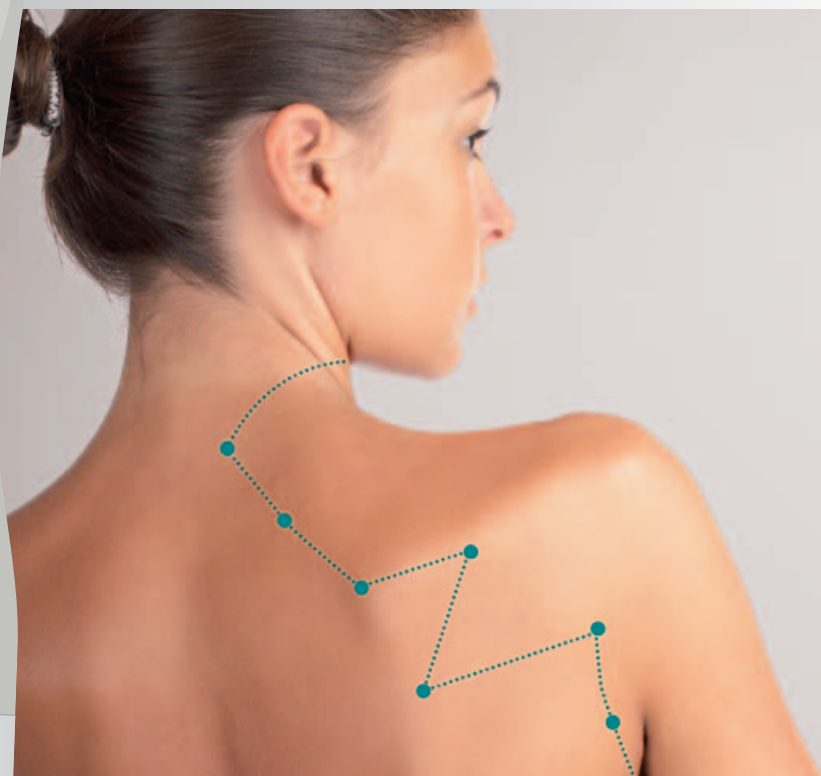

Acupuncture
Auriculothérapie
Traitements addictions
Réflexothérapie

Sedatelec


premi^o 30

Laser duo

Stimulation indolore des points du corps et de l'oreille



**4 modes
de traitement**

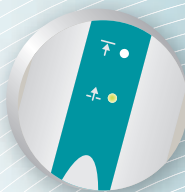

**2 puissances
adaptées**

points superficiels
points profonds



**Autonomie supérieure
à 10 heures**

Batterie
rechargeable

Entre tradition et modernité : **sûr et efficace**

Acupuncture

Tonification

Tonification des points d'acupuncture **contrôlée et rapide.**



Dispersion

En quelques secondes, vous réalisez **la dispersion du Qi** et vous évacuez la stase d'énergie.



Harmonisation

Ce traitement **rééquilibre le point et la circulation dans le méridien** par l'alternance des rythmes d'impulsion.



Auriculothérapie

Stimulation fréquente

Cette sélection vous garantit une stimulation des points « pathologiques » en **auriculothérapie** (douleurs, troubles psychologiques ou troubles fonctionnels, addictions, ...).



Innovation et efficacité des fréquences

Nouvelle dynamique d'émissions des impulsions


Vobulation (100-10 000Hz)

Accélération exponentielle

La Tonification résulte d'une **accélération** du **rythme d'émission des impulsions** qui a un effet dynamisant.



Tonification
Rythme des impulsions

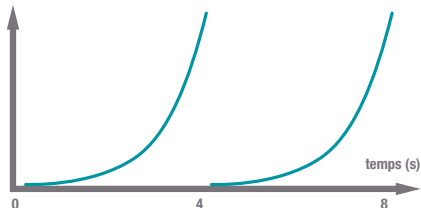


Décélération exponentielle

La Dispersion est obtenue par un **ralentissement** du **rythme d'émission des impulsions**.



Dispersion
Rythme des impulsions

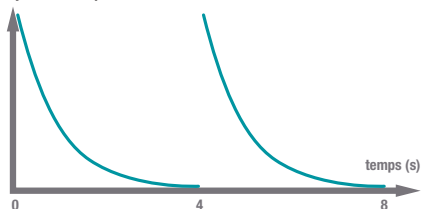


Accélération et décélération alternées

Une **alternance d'accélération et de ralentissement** du rythme d'émission conduit à l'**Harmonisation du point**.



Harmonisation
Rythme des impulsions

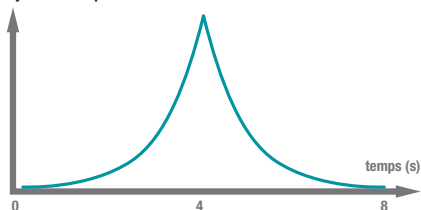

Balayage

Selon les 7 fréquences de Nogier

Le message est contenu dans la fréquence pour ce programme d'auriculothérapie.

Il permet l'émission successive par **balayage de toutes les fréquences Nogier** (de A à G, 73 - 4 672 Hz).





L'expertise reconnue en Laser Pulsé

Longueur d'onde

L'émission Infrarouge à une longueur d'onde de 905nm traverse la barrière cutanée pour atteindre les cellules en profondeur et pénétre en toute sécurité sans être absorbée par l'eau, l'hémoglobine et la mélanine de la peau.

Valeur crête

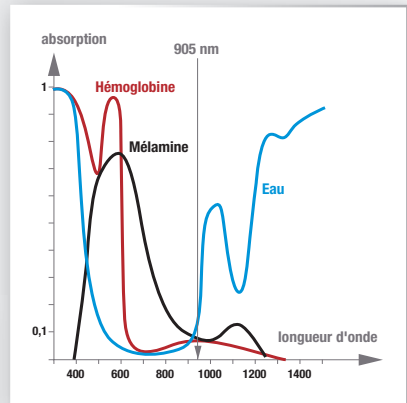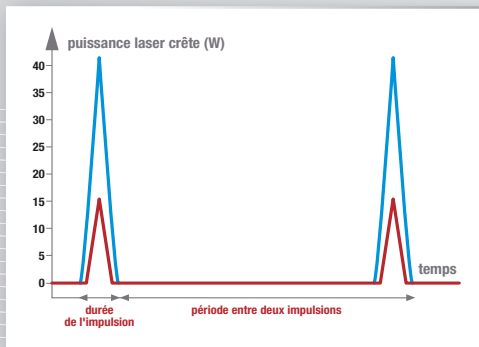

Le rayonnement Laser est émis sous forme d'impulsions courtes à puissance crête élevée. Ce mode d'émission donne au rayon Laser **la puissance nécessaire pour pénétrer les tissus** tout en les respectant, car, sans effet thermique destructeur, il apporte l'information utile au point.

Puissance réglable

La puissance 15 ou 40 Watts est réglable en fonction de la profondeur souhaitée

- **Points superficiels** : points en surface (visage, oreilles ...)
- **Points profonds** : autres points du corps.

Temps d'application

Traitement **court de 30 secondes** pour chaque point. Ce temps d'application permet de donner l'énergie optimale par point et de tenir compte du temps physiologique de réaction du corps.

Le + Sedatelec :
vobulation de fréquences en acupuncture

La signature Sedatelec :
les fréquences Nogier en auriculothérapie

Sedatelec

premio 30
Laser duo

**Efficace, léger
et ergonomique**

Un **Laser sans fil**,
idéal au cabinet
et en déplacement



*Emission laser invisible. Ne pas exposer le rayon laser vers les yeux. Classification 3B d'après IEC 60825-1
Caution : Federal law restricts this device to sale by or on the order of a physician.*

Demandez aujourd'hui la documentation « Plus d'information » sur le Premio 30 à votre distributeur ou en écrivant à sedatelec@sedatelec.com

Votre distributeur

CE 0123

Fabriqué en France

Sedatelec • Chemin des Mûriers • F-69540 Igny • Lyon • France • Tél. +33 (0) 472 663 32
Fax + 33 (0) 478 508 903 • sedatelec@sedatelec.com • www.sedatelec.com

