


# premio 20 DT

détection et stimulation électrique

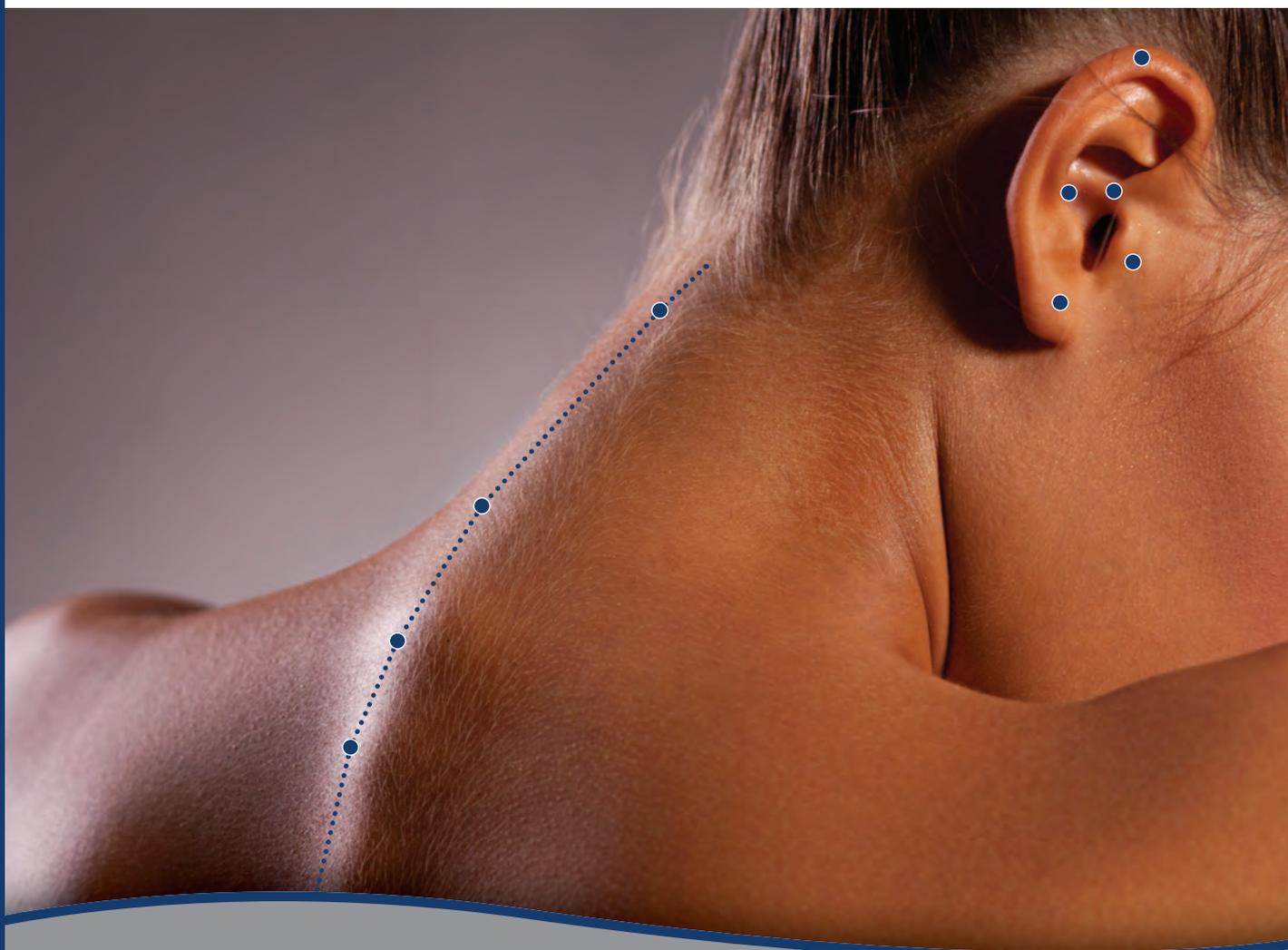

---

AURICULOTHÉRAPIE

---

ACUPUNCTURE

---

RÉFLEXOLOGIE

**Sedatelec**<sup>®</sup>  
YOUR WAY OF CARE,  
OUR QUALITY DEVICES

Créée par le **Dr Paul Nogier** dans les années 50, l'auriculothérapie est reconnue depuis les années 90 par l'OMS. Cette technique est aujourd'hui pratiquée dans le monde entier.



**L'ASP<sup>®</sup> Original** ou Aiguille Semi-Permanente a été créée et fabriquée en France par Sedatelec en collaboration avec le Dr Nogier.

Depuis la R&D jusqu'à la fabrication, en passant par la conception et le développement, tout est « **Made in France** ».

Sedatelec garantit ses produits pendant 2 ans et son SAV est assuré dans ses locaux, à Lyon, jusqu'à 10 ans après l'arrêt de la commercialisation.

ISO 13485  
CE0123

CONÇU & FABRIQUÉ  
EN FRANCE

# premio 20 DT

détection et stimulation électrique



À l'origine des premiers détecteurs de points auriculaires (Diascope®, Servoscope®, Agiscop®) **Sedatelec** a concentré tout son savoir-faire et son expertise dans l'élaboration d'une nouvelle génération avec le **Premio 20**.

## Révolutionnaire dans sa conception

**PRATIQUE** : pas de câble ou d'accessoire à installer

**ERGONOMIQUE** : premier appareil à lecture directe à l'oreille

**PRÉCIS** : détection différentielle à 9 niveaux avec affichage par LEDs

**INNOVANT** : vobulation de fréquences entre 1 et 100 Hz en stimulation

**SIMPLE** : réglage du seuil de déclenchement sonore

**CONFORT** : adaptation automatique de l'intensité de stimulation




## La détection

- Courant de mesure suffisamment faible pour ne pas perturber le point.
- Pression constante des électrodes de mesure sur l'épiderme.
- Système de détection différentielle (point et environnement) de **haute précision**.
- Détection possible en baisse (Gold) ou en hausse (Silver) d'impédance.
- **Seuil de déclenchement sonore réglable**.
- Affichage continu de la mesure sur **9 niveaux**.
- Une poignée de masse tenue par le patient, qui permet d'isoler le praticien du circuit de mesure.

## La détection différentielle

### Mesure de l'environnement du point

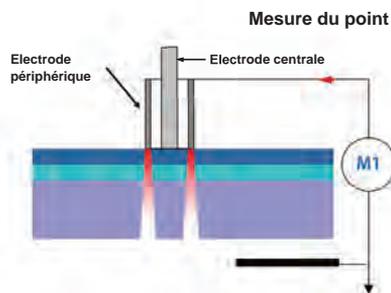

### 3 niveaux d'indication lumineuse par led



Clignotement lent



Clignotement rapide



Allumage fixe

Réglage automatique du seuil de déclenchement sonore par mesure du point « 0 »

VERSION D

VERSION DT





## La stimulation

- **Sans quitter des yeux** le point détecté, un simple appui sur la touche « D/T » déclenche une stimulation par balayage des 7 fréquences de Nogier\* (1,14 Hz inclus).
- **Adaptation automatique** de l'intensité de stimulation : pas de douleur ou de sensation de brûlure.
- Émission d'un « BIP » léger et rapide indiquant au patient et au thérapeute que la stimulation est en cours.
- Durée rythmée par un « BIP » plus fort toutes les 30 secondes : durée moyenne nécessaire pour invalider le point.
- Un nouvel appui sur la touche «D/T» permet de relancer la détection sans quitter des yeux l'oreille explorée.

\*Les fréquences de Nogier ne sont pas reconnues par Santé Canada.



« BIP » rapide

auriculothérapie




## La détection

- **Mesure directe** de la baisse d'impédance.
- **Embout ERT** spécial « Corps » avec pointe douce pour un glissé parfait.
- Allumage progressif des diodes proportionnel à la mesure.
- Lecture directe et instantanée de la mesure sur le stylet, confirmée par un « BIP sonore ».
- **Mémorisation du point cutané** détecté avec la plus faible impédance.
- **Fiabilité** : poignée de masse tenue par le patient, permettant d'isoler le praticien du circuit de mesure.




# La stimulation

- Sans quitter des yeux le point détecté, un simple appui sur la touche « D/T » déclenche une stimulation adaptée au besoin du patient.
- **INNOVATION** : émission par vobulation de fréquences :
  - alternée pour l'**harmonisation**,
  - descendante entre 100 et 1Hz en **dispersion**,
  - ascendante entre 1 et 100Hz en **tonification**.
- Possibilité de travailler par balayage des fréquences de Nogier\*.
- Adaptation automatique de l'intensité de stimulation : pas de douleur ou de sensation de brûlure.
- Émission d'un « BIP » régulier indiquant au patient et au thérapeute que la stimulation est en cours.
- Durée rythmée par un « BIP » plus fort toutes les 30 secondes.
- Un nouvel appui sur la touche «D/T» permet de relancer la détection sans quitter des yeux la zone explorée.

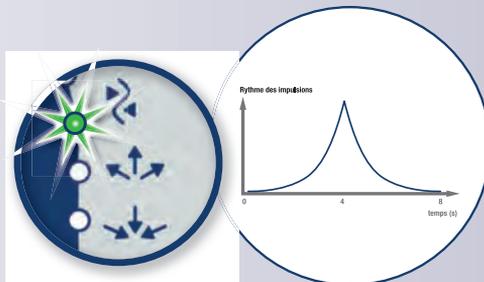


## HARMONISATION

Cette stimulation rééquilibre le point et la circulation dans le méridien, par l'alternance d'accélération et de ralentissements du rythme d'impulsion.

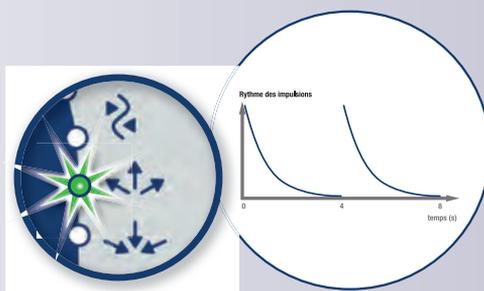

## DISPERSION (100 à 1 Hz)

En quelques secondes, vous réalisez la dispersion du Qi et vous évacuez la stase d'énergie. La dispersion est obtenue par un ralentissement du rythme d'émission des impulsions.

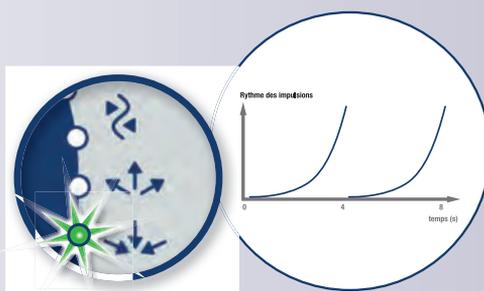

## TONIFICATION (1 à 100 Hz)

Stimulation des points d'acupuncture contrôlée et rapide. Effet dynamisant par accélération du rythme d'émission des impulsions.

---

« BIP » toutes les 30 secondes

---

## Efficace, léger et ergonomique

Un **détecteur/  
stimulateur** idéal  
au cabinet et en  
déplacement.



cachet distributeur

**CE** 0123

Fabriqué en France