

premio 32 v evo

softlaser zur biostimulation



TIERHEILKUNDE

FÜR PFERDE

HUNDE, KATZEN

NEUE HAUSTIERE

Sedatelec®
YOUR WAY OF CARE,
OUR QUALITY DEVICES

Soforthilfe in jeder Situation

Akute Schmerzen

Linderung in wenigen Minuten durch Steigerung der Mikrozirkulation. Alle Arten von Schmerzen, ob organischen oder neurogenen Ursprungs.

- Entzündungshemmend : Tendinitis, Verstauchungen, Bandscheibenvorfälle, Ohrentzündungen...
- Tumoraler Ursprung : Osteosarkom, Hirntumore...
- Traumatischer Ursprung : Unfälle von Haustieren im Straßenverkehr, Brüche, Bisswunden

Muskelverspannungen und -entzündungen

Lösen von Muskelverspannungen in wenigen Minuten durch direkte Einwirkung auf die Spannungssensoren der muskulo-tendinösen Übergänge.

- Tendinitis beim Pferd
- Verspannung nach Schulterluxation
- Pathologie der Rücken- oder Halswirbelsäule

Chirurgie

Beschleunigte und schmerzfreie Heilung durch Modulation der Nerveninformation, Stimulation der Mitochondrien und Produktion von ATP.

- Alle posttraumatischen Eingriffe, ob Knochen, viszeral oder kutan
- Einfache oder tiefe, offene Bisswunden
- Verbrennungen
- Komforteingriffe

Chronische Krankheiten / Schmerzen

Spürbare Verbesserung nach einigen regelmäßigen Sitzungen.

- Gingivostomatitis bei der Katze
- Arthrosen, chronische Ohrentzündungen
- Dysplasie der Hüfte oder des Ellbogens
- Anale Sakkulitis beim Hund, Leckgranulom
- Periphere oder degenerative Neuropathien




Die Laser-Biostimulation

- **DYNAMISIERT** die Proteinsynthese
- **STEIGERT** die Verteilung von Zytokinen und Neurotransmittern
- **BEGÜNSTIGT** die zelluläre Sauerstoffversorgung


Die Effizienz von Sedatelec

1 - Wellenlänge : 905 nm

Geringe Absorption, bessere Effizienz jeder Gewebeschicht.

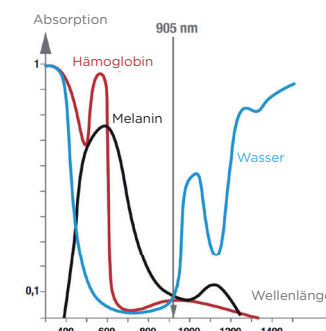


2 - Spitzenleistung : 100 Watt

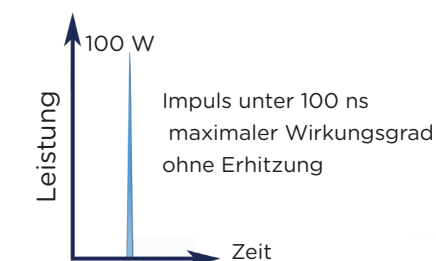

Gepulste Emission von Sedatelec-Lasern

3 - Gelieferte Energie : 2.5J/cm²/30sec

Supergepulste Emission moduliert nach den Nogier-Frequenzen.

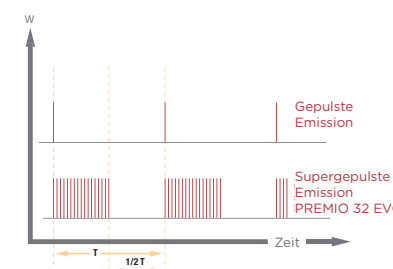


4 - Laseremission : Die Nogier-Frequenzen

Dr. Paul NOGIER hat vor mehr als 40 Jahren nachgewiesen, dass der Organismus empfindlich auf Frequenzreize ist und je nach Frequenz unterschiedlich reagiert.

Seitdem wurde durch zahlreiche Arbeiten nachgewiesen, dass der Wirkungsgrad des Frequenzlasers viel höher ist als der einfache photonische Effekt der Laserquelle selbst.

premio 32 v eva

softlaser zur biostimulation

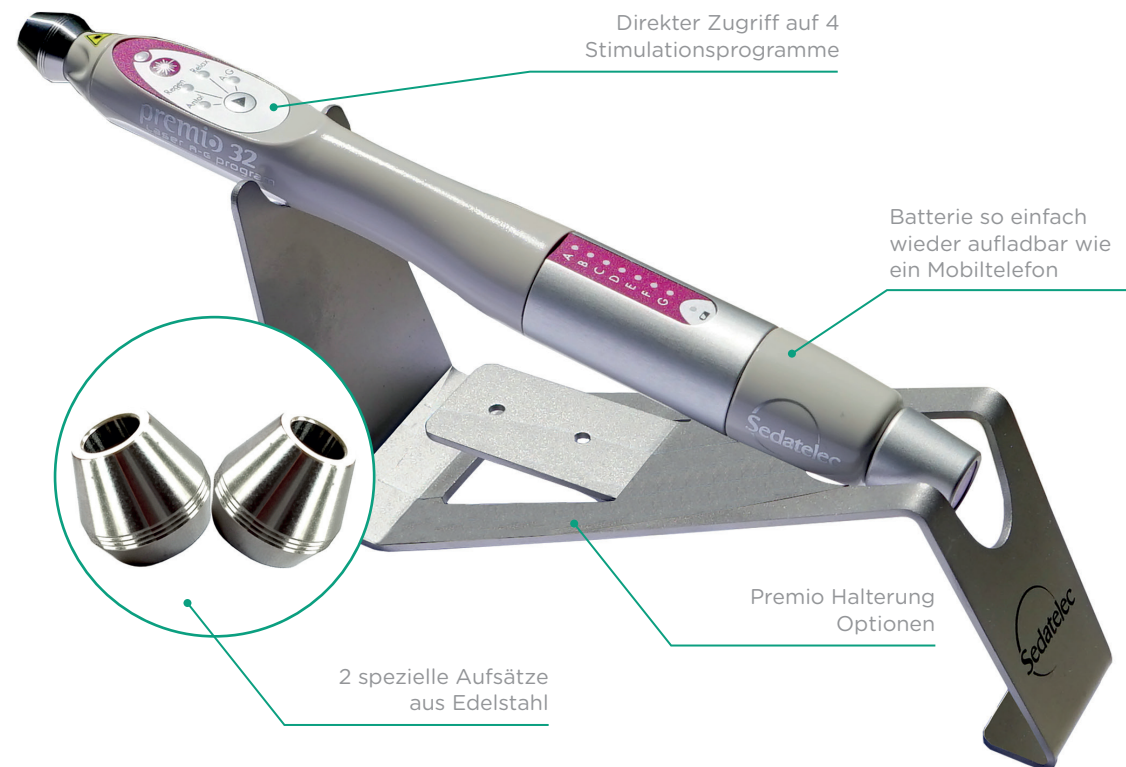

Revolutionär

Sie werden nicht mehr darauf verzichten können, und Ihre Patienten auch nicht !



- KABELLOS** : Einfache Handhabung, ohne Einschränkungen
- WIRTSCHAFTLICH** : Keine Verbrauchsmaterialien
- ERGONOMISCH** : Direkter Zugriff auf 4 Programme über spezielle Tasten
- PRAKTISCH** : Anzeige der verwendeten Frequenzen, Ortungston alle 30 Sekunden
- AUTONOM** : ca. 6 Stunden im Dauerbetrieb
- PRÄZISE** : Beleuchtung der Behandlungszone



Der Sedatelec-Pluspunkt : Die Nogier-Frequenzen

Geben Sie sich ein positives Image.

Bessere Ergebnisse bedeuten zufriedene Patienten

- **ANTAL : Schmerzlindernde Wirkung E und G**
 - Reduziert die Schmerzübertragung an das zentrale Nervensystem
 - Wirkt lokal auf den schmerzhaften Prozess und verbessert das Empfinden des Patienten
- **REGEN : Rekonstruktive und entzündungshemmende Wirkung A, B und F**
 - Stellt die Zellfunktionen wieder her
 - Wirkt auf die Bildung von Knochennarben
 - Beschleunigt die Geweberekonstruktion sowie die Oberflächen- und Tiefenheilungs- und Regenerationsprozesse
- **RELAX : Muskelentspannende Wirkung C, D und G**
 - Löst Muskelverspannungen und Kontrakturen bei lokaler Anwendung
- **A - G : Abtastung der Nogier-Frequenzen**
 - Stimuliert die Krankheitsbereiche (Schmerzen oder Funktionsstörungen, ...) durch aufeinanderfolgende Emission aller Nogier-Frequenzen

Individuelle Frequenzwahl

Wirkung auf eine bestimmte physiologische Funktion

- A** = 2,28 Hz
Entzündungshemmende Wirkung
- B** = 4,56 Hz
Anregung der Stoffwechselfunktionen
- C** = 9,12 Hz
Stimulation der Bewegungsfunktionen
- D** = 18,25 Hz
Stimulation von Symmetrie- und Lateralitätsfunktionen
- E** = 36,5 Hz
Schmerzlindernde Wirkung
- F** = 73 Hz
Heilwirkung
- G** = 146 Hz
Behandlung von chronischen Schmerzen

funktionen



40 Jahre Erfahrung im Softlaser Bereich

Sedatelec wurde im Jahre 1978 gegründet. Von Anfang an arbeitet die Firma mit **Doktor Paul NOGIER** (1908-1996) zusammen und entwickelt die **ersten elektronischen Geräte und Kaltlaser** für Tierärzte.



Von der F&E über die Fertigung bis hin zum Marketing, alles ist « **Made in France** ».

Sedatelec gewährt auf ihre Produkte eine Garantie von 2 Jahren und garantiert den Kundendienst in ihrem Werk in Lyon bis zu 10 Jahre nach Ende der Vermarktung.

ISO 13485



Die Wirkung des Softlasers wird von allen wahrgenommen !

— CHRONISCHE ARTHROPATHIEN

Dr S. Mareuil, France

- Bei chronisch schmerzhaften Arthropathien wie proximale Sesamoiditis, Knochenhautentzündung (sehr schmerzhaft im Fall von Überbeinen beim Pferd), verwende ich den Sedatelec-Laser in der Position „Antal“ dann „Regen“ 30 Sek. bis 1 Minute pro Zone, und die Ergebnisse sind bereits nach den ersten Sitzungen bemerkenswert.
- Es wird auch festgestellt, dass sich die Patienten sofort entspannen, die Augenlider schließen und den Kopf senken.

— HEILUNGSPROZESS

Dr A. Toulouse, France

- Nach Behandlungen von Bisswunden oder bei chirurgischen Nähten ermöglicht die Anwendung des Sedatelec-Lasers in der Position „Regen“ eine **Beschleunigung des Heilungsprozesses**, so dass die Nachwirkungen stets verkürzt und vereinfacht sind.

— BELASTUNGSTENDINITIS

Dr A. Lyon, France

- Bei Tendinitis, insbesondere der oberflächlichen Beugesehne bei Pferden, ermöglicht die Behandlung mit dem Sedatelec-Laser einerseits eine schnelle Reduzierung der Lahmheit und der Tastsensibilität des behandelten Bereichs und andererseits eine Verringerung des Durchmessers der verletzten Gliedmaßen, was die antiödematöse Wirkung im Zusammenhang mit der Verbesserung der Durchblutung bestätigt

— INDUZIERTE TENDINITIS

Dr B. Dardilly, France

- In einer randomisierten klinischen Studie, in welcher der Sedatelec-Laser sowie ein Placebo-Laser an Pferden mit induzierter Tendinitis getestet wurden, haben sämtliche klinische Untersuchungen (Messung des Umfangs, lokale Temperatur, Lahmheit,...), Ultraschall und histologische Untersuchungen, die Beschleunigung des Regenerationsprozesses der experimentell verletzten Sehnen bestätigt. Die Genesung ist qualitativ hochwertig und viel schneller.

Weitere Studien in der PUBMED-Datenbank.



Revolutionär, tragbar und wirtschaftlich

Geben Sie Ihren Patienten ihre
Gesundheit mit der neuesten
Technologie der Laser-Biostimulation
zurück

Lieferung mit Koffer inklusive :

- PREMIO 32 EVO
- 2 spezielle Aufsätze aus verstärktem Edelstahl
- 1 Tester zur Emissionskontrolle
- 1 Schutzbrille
- 1 Sicherheitsschlüssel und ein Ladegerät
- 1 Prüfgerät für die Emissionskontrolle



Lesen Sie vor dem Gebrauch die
Gebrauchsanweisung aufmerksam durch



Lasergerät der Klasse 3B gemäß IEC 60825-1

Unsichtbare Laserstrahlung

Für die Augen gefährliche Strahlenexposition.

Caution: Federal law restricts this device to sale by or on the order of a physician.



Stempel des Fachhändlers

Hergestellt in
Frankreich