

# premio 30 evo

Laser duo

NEU!

Beleben Sie  
das Qi  
tiefgreifend



AKUPUNKTUR

AURIKULOTHERAPIE


SUCHTBEHANDLUNG

REFLEXZONENTHERAPIE

**Sedatelec**<sup>®</sup>  
YOUR WAY OF CARE,  
OUR QUALITY DEVICES

# premio 30 evo

Laser duo

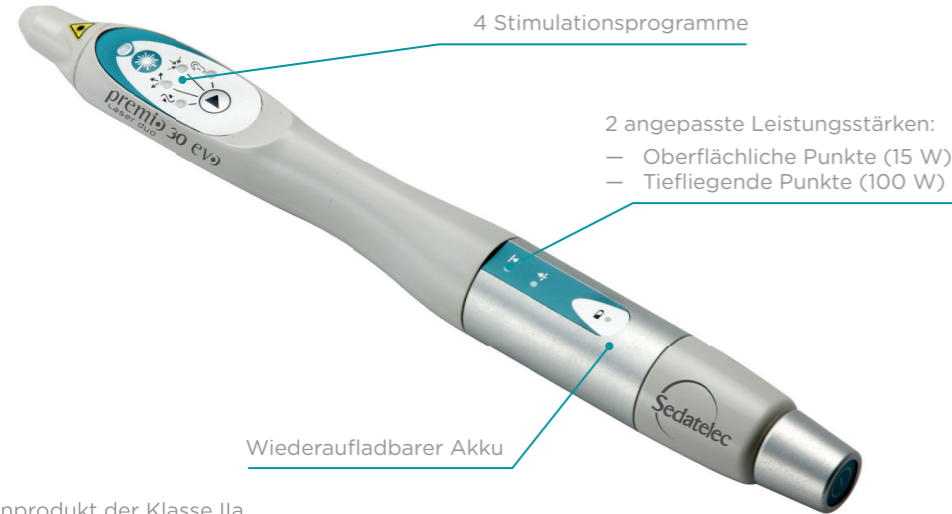

Medizinprodukt der Klasse IIa

## Ein Kaltlaser für die schmerzfreie Infrarotstimulation von Akupunkturpunkten, Ohrpunkten und Triggerpunkten

Biostimulation  
im Dienste  
des Qi



### Zwischen Tradition und Modernität: sicher und effizient

- DRAHTLOS:** einfache Handhabung, keine Einschränkungen
- ÖKONOMISCH:** Keine Verbrauchsmaterialien
- ERGONOMISCH:** Direkter Zugriff auf die 4 Programme über eine spezielle Taste
- ANGEPASST:** 2 angepasste Leistungsstärken:
  - Oberflächliche Punkte 15 W: Gesicht, Ohren, Kinder...
  - Tiefliegende Punkte 100 W: Andere Körperpunkte
- DYNAMISCH:** Mobilisierung des Qi
- SCHNELL:** 30 Sek./Punkt



## Stimulation bei der Akupunktur

- Harmonisierung**  
Dieser Modus bringt den Punkt und die Zirkulation im Meridian durch abwechselnde Impulsrhythmen wieder ins Gleichgewicht.
- Sedierung**  
Innerhalb von wenigen Sekunden erfolgt die Dispergierung des Qi und die Energiestase wird zum Fließen gebracht.
- Tonisierung**  
Kontrollierte und schnelle Stimulation der Akupunkturpunkte.

## Stimulation bei der Aurikulothérapie

### Durchlauf der Nogier-Frequenzen

Alle Nogier-Frequenzen (von A bis G) werden nacheinander ausgestrahlt, um unabhängig von der Symptomatik die passende Information zu vermitteln. Dieser Durchlauf ermöglicht die Stimulation der so genannten pathologischen Punkte in der Aurikulothérapie, deren Effizienz bei Schmerzen, psychologischen oder funktionellen Störungen, Suchterkrankungen usw. anerkannt ist.

### Eine angepasste Dynamik der Impulsemission:

- Die Wobelfrequenz zur Dynamisierung des Qi
- Die Nogier-Frequenzen in der Aurikulothérapie


# Die Dynamik des Qi




Das Qi ist der Ausdruck für den Lebensatem, die Energie, die Kraft in Aktion, es steht für das Leben und symbolisiert die Bewegung. Diese Energie fließt kontinuierlich durch die Meridiane, ist Ausdruck von Yin und Yang, in ihrem Gleichgewicht und im regelmäßigen Zyklus ihres Wechsels. Sie ermöglicht das harmonische Funktionieren des Lebewesens in seiner Individualität, eingebettet in seine unmittelbare Umgebung wie auch in die Gesamtheit des Universums.

Bei der gründlichen und umfassenden klinischen Untersuchung, nach dem Aufspüren von Funktionsstörungen und der Analyse der Ursachen, muss man dort **tonisieren**, wo die Energie fehlt, **sedieren**, wo sie im Übermaß vorhanden ist, **harmonisieren** und den Fluss neu ausrichten, wenn die Kreuzungspunkte gestört sind.


**Harmonisierung**  
Abwechselnde Tonisierung und Sedierung  
Abwechselnde Beschleunigung und Verlangsamung des Emissionstakts.

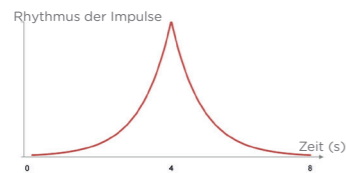

**Sedierung**  
(10.000 bis 100 Hz)  
Wird durch eine Verlangsamung des Impulstakts erreicht.

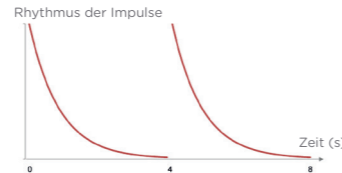

**Tonisierung**  
(100 bis 10.000 Hz)  
Beschleunigung des Impulstakts, die eine dynamisierende Wirkung hat.

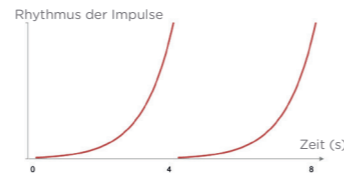

## Wobbelung zur Erhaltung des Qi:


Sedatelec hat einen neuen Ansatz für die physiologischen Impulse entwickelt, der nicht mehr auf sich wiederholenden Frequenzen, sondern auf Dynamik, d.h. auf Beschleunigung und Verlangsamung beruht, da davon ausgegangen wird, dass der Organismus die Änderung des Signals als grundlegende Information interpretiert.

**Das, was für ein Lebewesen zählt, ist Dynamik, Veränderung, Variation!**

# Effiziente Stimulation

## Wellenlänge

Die **Infrarotstrahlung mit einer Wellenlänge von 905 nm** durchdringt die Haut und erreicht die in tieferen Schichten gelegenen Zellen, wobei sie weniger von Wasser, Hämoglobin und Melanin absorbiert werden.

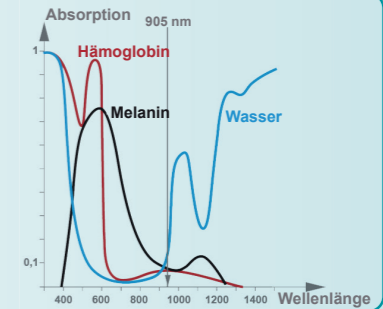

## Spitzenleistung

Die Leistung **15** oder **100 Watt** kann entsprechend der gewünschten Tiefe ausgewählt werden. Eine Spitzenleistung von **100 Watt** versorgt den Laserstrahl **mit der nötigen Energie, um bis in die tiefen Zellen vorzudringen** und die relevanten Informationen an den Punkt zu transportieren.





## Gepulste Emission

Emission mittels sehr kurzer Impulse (<100 ns), die mit einer langen Pausenzeit wiederholt werden. Sie liefern eine Energie zwischen:

- **150 mJ/30 Sek.** bei 15 Watt
- **1.25 J/30 Sek.** bei 100 Watt,

ohne zerstörerische Wärmewirkung.

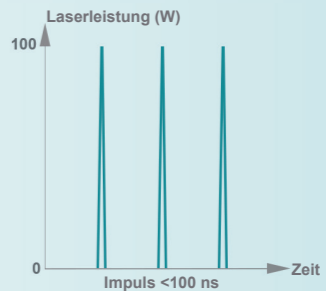

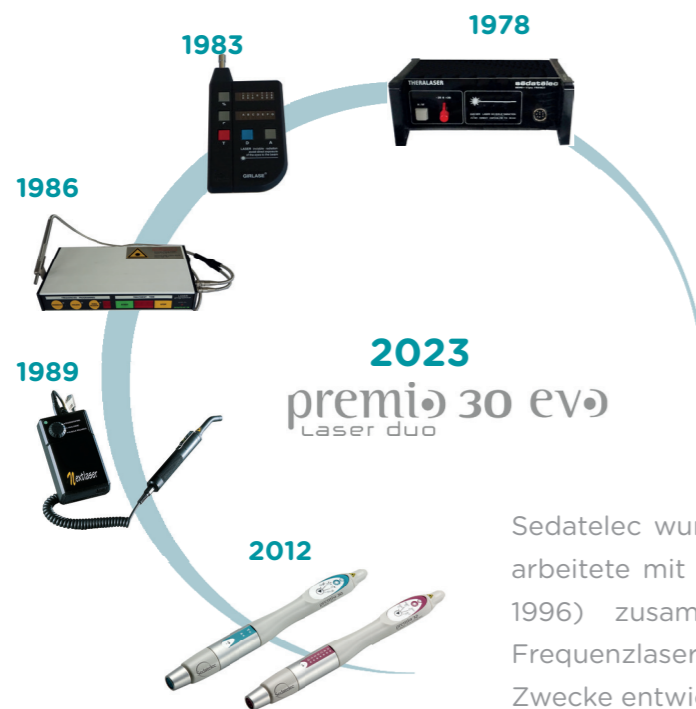

Sedatelec wurde 1978 gegründet und arbeitete mit Dr. Paul NOGIER (1908-1996) zusammen, der die ersten Frequenzlasergeräte für diagnostische Zwecke entwickelte.

Von der Forschung und Entwicklung über die Herstellung bis hin zur Vermarktung ist alles „Made in France“.

Sedatelec gewährt auf seine Produkte eine Garantie von 2 Jahren und der Kundendienst wird in seinen Räumlichkeiten in Lyon bis zu 10 Jahre nach Einstellung des Vertriebs gewährleistet.

**CONÇU & FABRIQUÉ  
EN FRANCE**



## Die von allen festgestellten Vorteile des Soft-lasers

### – REFLEXOLOGE D.F. Lyon

Der Premio 30 EVO ist der perfekte Helfer in meiner Praxis bei der Ohr- und Gesichtsreflexzonenmassage. Er ist ein effektives, schmerzfreies und handliches Hilfsmittel zur Stimulation. Ich verwende das Gerät bei Sehnen- und Ischiasentzündungen, indem ich die entsprechenden Ohrpunkte stimriere, und die spürbare Wirkung tritt sofort ein. Ich möchte nicht mehr darauf verzichten!

### – AKUPUNKTEUR E.S. Aix-en-Provence

Ich habe den Premio 30 EVO getestet und bin beeindruckt von den Ergebnissen, die ich bei meinen Patienten erzielt habe! Ich benutze das Gerät, um Akupunkturpunkte, mit den Modi „oberflächennah“ und „tiefliedend“, zu stimulieren, die Effizienz ist dabei tatsächlich mit dem Empfinden durch eine Nadel vergleichbar. Ich kann es nur empfehlen!

### – AKUPUNKTEUR Nancy

Meine Kollegen und ich haben den PREMIO 30 EVO im Vergleich zum PREMIO 30 der älteren Generation getestet. Ich persönlich bin sehr begeistert und auch meinen Kollegen hat das Gerät sehr gut gefallen. Wir nutzen es täglich.

### – TCM-PRAXIS S.C. St Genis Laval

Ich benutze den PREMIO 30 seit einem Jahr und bin sehr zufrieden damit. Er ist ein tolles Gerät, das besonders für empfindliche Personen (Kinder, Senioren ...) und Personen mit einer Nadelphobie geeignet ist. Ich empfehle es weiter.

## Drahtloser Laser, ideal für die Praxis und für unterwegs

### Transportkoffer mit folgendem Inhalt:

- PREMIO 30 EVO
- 1 Prüfgerät für die Emissionskontrolle
- 1 Schutzbrille
- 1 Ladegerät
- 1 Bedienungsanleitung



Lesen Sie vor dem Gebrauch die Gebrauchsanweisung aufmerksam durch



Laserggerät der Klasse 3B gemäß IEC 60825-1  
Unsichtbare Laserstrahlung

Für die Augen gefährliche Strahlenexposition.

Caution : Federal law restricts this device to sale by or on the order of a physician.

Stempel des Fachhändlers

CE 0123  
Made in France